


خطوات إعداد أداة REDCap لجمع البيانات للهاتف المحمول

- 1) تحتاج إلى تنزيل التطبيق على جهازك المحمول بعنوان "REDCap Mobile App" أو ما شابه.
- 2) تسجيل الدخول إلى الموقع التالي REDCap على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ،
حدد Global PaedSurg Database Arabic ثم بمجرد فتحه ،
- 3) حدد "تطبيق REDCAP للهاتف المحمول" على الجانب الأيسر من الشاشة كما هو موضح أدناه.

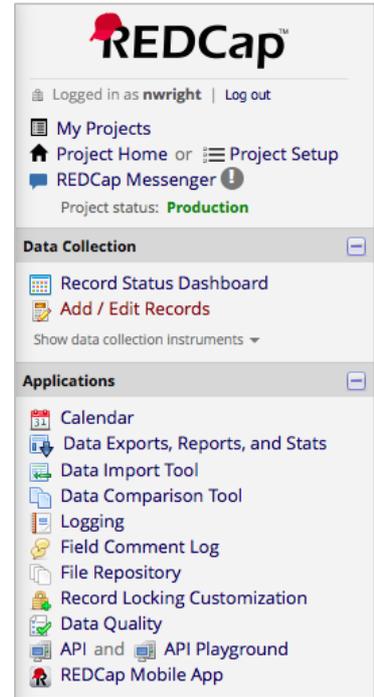

4) اتبع التعليمات للحصول على رمز "API". سيقوم هذا بإرسال طلب إلى مدير REDCap ،
السيد Bolaji Coker.

5) بعد ذلك سوف يتم إرسال بريد إلكتروني من قبل مدير REDCap مع رابط (عادة في غضون 24-48 ساعة)
- افتح الرابط المرسل اليك . سيعيدك إلى موقع REDCap وسيعرض لك رمز "API".

6) الآن ، افتح تطبيق REDCap على هاتفك المحمول. اختر كلمة مرور (مرتين) ل Admin و User
وكلمة المرور (مرتين) لحقوق جمع البيانات (data collection rights).
يقوم جميع المتعاونين بذلك (سواء Admin أو User ، على الرغم من أنك لن تحتاج إلى استخدام Admin ،
فقط ستحتاج User لإدخال البيانات).

7) بمجرد فتح التطبيق ، انقر فوق " Set Up Mobile Project ".

8) انتقل الآن مرة أخرى إلى قسم REDCap Mobile App من موقع الويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك - سيقوم الآن باختيار رمز API الخاص بك وسوف يصدر "رمز الاستجابة السريعة (QR)". يمكنك إما مسح هذا الرمز إلى هاتفك المحمول أو إدخال التفاصيل. يوفر التطبيق تفاصيل خطوة بخطوة حول كيفية القيام بذلك.

9) يجب أن يظهر مشروع Global PaedSurg على تطبيقك. ستتمكن الآن من إدخال البيانات. للقيام بذلك ، انقر فوق "My project" ، ثم انقر فوق مستطيل "Global PaedSurg" ، وانتظر ثانية للتحميل ، ثم انقر فوق "Collect Data" في الأعلى ، ثم انقر فوق المستطيل أسفل "select instrument" ، ثم في أسفل اليمين انقر فوق "Create New Record". الآن يمكنك إكمال النموذج بنفس الطريقة على موقع REDCap. انقر فوق زر حفظ.

10) سيتم تخزين جميع البيانات على هاتفك. عندما تريد تحميلها على موقع REDCap انقر على "My Projects" ، ثم مستطيل Global PaedSurg ، ثم "Send Data to Server" ، ثم انتظر ثانية لتحميل الصفحة ، ثم انقر فوق "Begin send of all data" انتظر بينما يتم التحميل.

إضافة أو تغيير البيانات الخاصة بالمريض :

بعد أن يتم تحميل أي بيانات إلى موقع REDCap ، لن يتم تحديث أي تغييرات تجريها على البيانات عبر الموقع الإلكتروني تلقائيًا إلى التطبيق. لذا يرجى إجراء أي تغييرات على السجلات الموجودة التي تم إنشاؤها على التطبيق إما فقط من خلال التطبيق أو من خلال الموقع فقط. إذا قررت إجراء تغييرات من خلال التطبيق ، فسيُتعين عليك إعادة إرسال السجل إلى الخادم بعد إجراء التغييرات. يتم ذلك باستخدام نفس العملية كما هو موضح في الخطوة 10 ، ولكن قبل إرسال البيانات ، سترى الشاشة أدناه. انقر على "Show Details" وحدد "Mobile Value" ثم "Send Records With Changes". سيؤدي هذا إلى تحميل بياناتك إلى موقع الويب بالتغييرات التي أجريتها.

Confirm Changes Made to Existing Records

Key: Mobile changed; server unchanged
Mobile changed; server also changed

Record 17 - Mobile changed

Send the data to the server? Yes No

Show details

The highlighted cell below is what will be sent to the REDCap server. If you wish, you may change the value to be sent by tapping it.

Field Name	Server Value	Mobile Value
Procedure name	<input type="radio"/> Server value	<input checked="" type="radio"/> Mobile value

Send Records With Changes

إذا قمت بإجراء أي تغييرات للسجل على موقع الويب ، فلن يتم تحديث النسخة على التطبيق. لذلك يجب عليك الاستمرار في إجراء تغييرات على هذا السجل فقط من خلال موقع الويب

أشياء يجب أن تكون على علم بها :

سوف تحتاج إلى الوصول إلى الإنترنت لإعداد التطبيق. بمجرد إعداده ، يمكنك إدخال البيانات على التطبيق دون أي اتصال بالإنترنت وتحميل كل ذلك ببساطة إلى موقع الويب عبر هاتفك عندما يكون لديك اتصال متاح لشبكة الإنترنت . إذا تم النقر على الزر "تحديث الإعداد والبيانات" ، فسيؤدي هذا إلى حذف جميع السجلات في التطبيق حتى إذا لم يتم إرسالها إلى الخادم. قد لا يتطابق رقم السجل في التطبيق مع الأرقام الموجودة على موقع الويب ولكن سيتم تحديث ذلك عند إرسال السجل إلى الخادم.

الأسئلة :

الرجاء إخباري إذا كانت لديك أية مشكلات أو لديك أي أسئلة أثناء متابعة المشكلة. أخشى أن يتضمن ذلك عددًا من الخطوات للإعداد ، ولكن بمجرد إعداده ، يجب أن يكون سهل الاستخدام.